

新製品のご案内

ハビナス

NEW

おむつ交換がラクになる

尿便 おしりにひろがらないシート



378円(本体価格350円) 特許出願中


軟便モレ対策に

介護する人の大きな悩み「モレ」の実態

尿便モレの発生状況 在宅編

尿が(尿とりパッドから)モレてしまう**53.2%**
便が(尿とりパッドから)モレてしまう**18.8%**

※要介護者の尿や便がモレる頻度 n=186(紙おむつ+尿とりパッド使用者)
■1週間に複数回 ■1週間に1回くらい

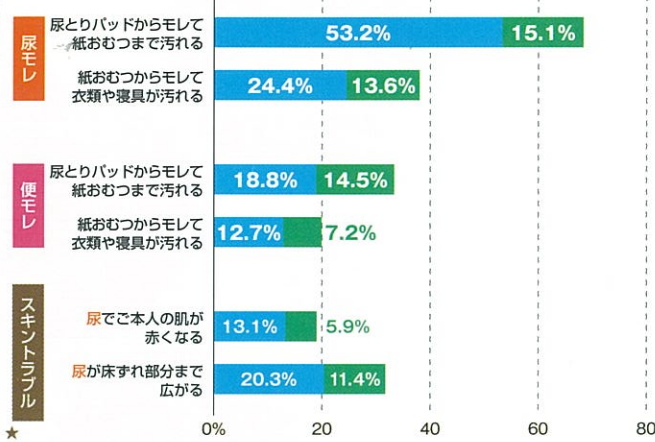

パッドからモレてしまう=パッド・アウターを交換、紙おむつからモレてしまう=衣類・寝具を交換。尿で要介護者の肌が赤くなる方も1割強存在。床ずれ部分まで尿が広がってしまう方もあり、スキントラブル^{*}悪化の可能性も。


※ビジョン調べ

尿便モレの発生状況 施設編

尿が(尿とりパッドから)モレてしまう**16.6%**^{*}
便が(尿とりパッドから)モレてしまう**14.6%**^{*}

※調査結果から、1施設内におけるビジョン試算

利用者の尿や便がモレる程度と割合 n=109(紙おむつ+尿とりパッド使用者)
■半数よりも多い ■5割程度 ■4割程度 ■3割程度 ■2割程度 ■1割程度 ■1割より少ない ■1人もいない

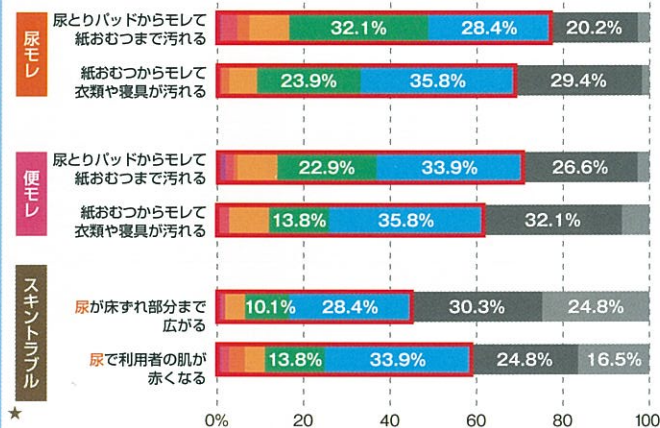

介護施設でも、7割の施設が「尿モレ・便モレする人が1割以上いる」と回答しています。

※ビジョン調べ

尿や便が、紙おむつからモレた時に起こること

尿や便が、紙おむつからモレた時...

- おしり、もも、背中などひろい範囲が汚れる
- 汚れがシワに入り込む
- 汚れが床ずれ部分に付着する
- 要介護者のスキントラブル^{*}が起こる

- 紙おむつ、パッドのセットを交換
- 衣類や寝具の交換
- 尿や便を拭き取る範囲が広がる
- 何度も拭き取りが必要になる
- 便を洗い流す

高齢者の肌は乾燥しがちです


肌の角質層が乾燥してひび割れ、尿便による刺激に弱くなっています。

度重なるおむつ交換の刺激等が影響し、スキントラブル^{*}が発生しやすくなってしまいます

尿や便がモレた時に困っていること 在宅編


便のお困りごと

n=130(軟便・下痢便が月1回以上出る人)
■非常に困っている ■やや困っている

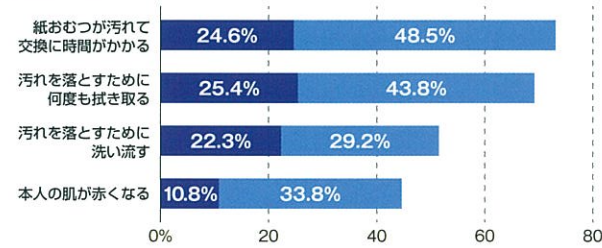

尿のお困りごと

n=221(紙パンツ・テープ止め使用者)
■非常に困っている ■やや困っている

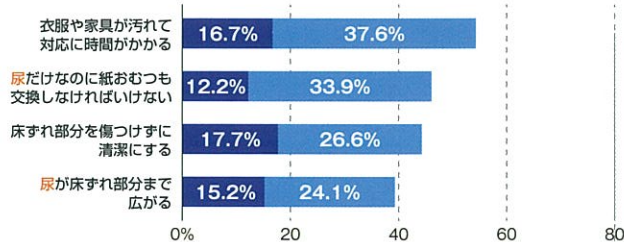

おむつ交換の作業が増える事やスキントラブル^{*}の発生に困っている

※ビジョン調べ

ひろがり・モレによる「おむつ交換作業の増加」は、尿便をひろげない=モラさないことで解決を

おむつ内環境を改善しましょう!

尿便 おしりにひろがらないシート


シートが体にフィットして

尿や便をひろげずパッドに落とすからパッド・紙おむつからのモレを防ぎます



現在の排泄ケア用品(パッド・紙おむつ等)
排泄物が肌を伝って流れやすくなりひろがってしまいます

排泄ケア用品にシートをプラス
排泄物の拡散を防ぎながら透過効率よく排泄ケア用品に吸収できます

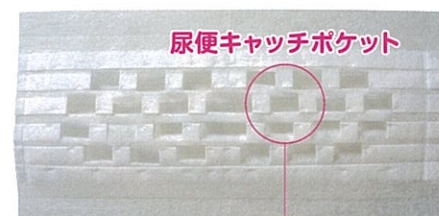

ヒミツはポケットがたくさんついたシート構造

※通常ポケットは閉じています

※イラストはイメージです

排泄物の重みで真下に垂れ下がるポケット構造になっているため、肌表面にひろがらず、パッドに吸収させる道筋をつくれます。

STEP 1 尿便をおしりにひろげない 3つのSTEP

STEP 1 出た瞬間の尿便をひろげない
おしりにフィットしたシートが尿便をキャッチ。

STEP 2 尿便をひろげずパッドに落とす
ポケットから尿便をひろげず、モレないように、パッドに吸収させる。

STEP 3 シート透過後もひろげない
尿や便の水分はパッドが吸収。水分がシートに残りにくく、肌をドライに保つ。便はポケットが保持するから、おしりにひろがらない。

尿便のひろがり・モレを防ぐから

おむつ交換がラクになるスキントラブル^{*}の発生リスクを減らせる

介護施設モニター

尿や便でおしりが汚れる範囲がせまくなりました。

ゆるい便がひろがらなかったため、いつもより拭き取りがラクでした。

いつもは尿がパッドからモレてしまうのに、シートを使うとモレませんでした。

利用者が「すぐにサラッとして気持ち悪くない」と言っていました。

施設スタッフから高い評価をいただいております!

※ビジョン調べ 全て個人の感想です。

★スキントラブル: 尿便による肌への刺激。拭き取りによって肌が赤くなること。

ラボ試験 人工便注入実験

マネキンに尿とりパッド(とシート)を装着し、人工便を80cc注入

尿とりパッドのみ
(シートなし)の場合



便拡散面積：**280cm²**

おしり(仙骨部分)方向、横方向へ
便が拡散してモレてしまった

尿とりパッドに
シートを装着した場合



便拡散面積：**80cm²**

パッド内で便の拡散が抑制され、
モレも防ぐことができた

※ビジョン調べ

介護施設モニター

実際に使ってもらったところ

n=モニター枚数

水様便の
ひろがり

43.4%

抑制

n=58

泥状便の
ひろがり

41.7%

抑制

n=58



尿の
ひろがり

63.8%

抑制

n=89

※ビジョン調べ

マーケティングサポート

サンプ
リング

より多くのターゲットに
体験してもらう

店頭什器

店頭での訴求を
高める

リーフ
レット

商品理解を深める

Web
特設サイト



ビジョン コード	ビジョンタヒラ コード	商品名	総額表示(円)	略称名		パッケージサイズ/重量 (高さ×正面幅×奥行)	ITFコード	JANコード
			本体価格(円)	商品名(カナ)	ケースサイズ/重量 (高さ×正面幅×奥行)			
09282	609800DH	尿便おしりに ひろがらないシート 25枚	378円	ニ ヨ ウ ヘ ン シ ー ト	80×200×150mm /89g	14902508092828	4 902508 092821	
			350円					ニ ヨ ウ ヘ ン オ シ リ ニ ヒ ロ カ ン ラ イ シ ー ト

※以上の内容は変更する可能性があります。 ●印刷物と実物とでは多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

ビジョン タヒラ株式会社

〒165-0021 東京都中野区丸山2丁目5番19号 TEL.03-5373-6711(代)

●札幌営業所(011)611-7391 ●盛岡営業所(019)635-4135 ●東京支店(03)5373-6751
●名古屋営業所(052)231-9811 ●大阪支店(06)6354-5771 ●広島営業所(082)543-5181
●福岡営業所(092)716-3621